

DESCRIPTION :

Collier cervical en mousse.

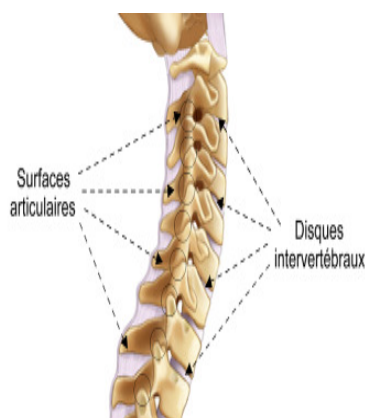
CARACTERISTIQUES:

Collier cervical composé d'une mousse de forme anatomique recouverte de jersey coton non traumatisant et d'une fermeture de type Velcro permettant un réglage précis.

Les colliers cervicaux Actimove® Cervical sont disponibles en deux densités, semi-ferme et ferme, adaptées à un maintien plus ou moins fort de la région cervicale ainsi qu'en plusieurs tailles.

Ne contient pas de latex naturel

Ne contient pas de phthalate

**INDICATIONS:**

Syndrôme cervical douloureux, aigu ou chronique (arthrose cervicale, torticolis, entorse cervicale bénigne...)

MODE D'EMPLOI:

Application :

Le collier cervical Actimove® Cervical préformé est destiné à épouser les contours du cou.

Placer le collier devant le cou et faire reposer le menton dans la découpe prévue à cet effet.

Enrouler le collier autour du cou et fermer à l'aide de l'attache.

PARTICULARITES D'UTILISATION:

En cas de décoloration de la peau, d'hyperhydrose, d'un sentiment d'inconfort, enlever le collier cervical et consulter votre médecin.

Ne pas trop serrer le collier afin de ne pas entraver la respiration

Veiller à ce que les plaies recouvertes par le collier cervical soient protégées par un pansement approprié.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Mesurer le tour et la hauteur du cou afin de choisir un collier cervical adapté et éviter toute tension excessive.

ENTRETIEN :

Le collier cervical Actimove® Cervical peut être lavé à l'eau tiède ou en machine à 30°C (cycle délicat). Fermer les attaches avant de laver le collier en machine. Rincer abondamment et laisser sécher à température ambiante.

S'assurer que le collier est parfaitement sec avant la prochaine utilisation.

CONTRE-INDICATIONS:

Atteintes sévères des cervicales de type fractures

CONDITIONNEMENT:

Présentation unitaire avec notice d'utilisation

Sachet plastique unitaire

Pour le confort et l'hygiène du patient, une longueur supplémentaire de jersey coton est livrée avec le collier cervical Actimove*.

1. Présentation Pharmacie avec vignette LPPR

A. Mousse semi-ferme

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809016062	7843612	72819-09025-00	XS/6,5cm sous menton	1	60	2118823
4042809016093	7843629	72819-09026-00	S/7,5cm sous menton	1	60	2118823
4042809016123	7843635	72819-09027-00	M/9cm sous menton	1	60	2118823
4042809016154	7843641	72819-09028-00	L/10cm sous menton	1	40	2118823
4042809016185	7843658	72819-09029-00	XL/11cm sous menton	1	40	2118823
4042809016215	7843664	72819-09030-00	XL-Court/7cm ss menton	1	50	2118823

B. Mousse ferme

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809016246	7844190	72819-09031-00	X/6,5cm sous menton	1	60	2118823
4042809016277	7844209	72819-09032-00	S/7,5cm sous menton	1	60	2118823
4042809016307	7844215	72819-09033-00	M/9 cm sous menton	1	60	2118823
4042809016338	7844221	72819-09034-00	L/10cm sous menton	1	40	2118823

4042809016369	7844238	72819-09035-00	XL-Court /7cm ss menton	1	50	2118823
---------------	---------	----------------	-------------------------	---	----	---------

2. Présentation hôpital sans vignette LPPR

A. Mousse semi-ferme

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809016062		72819-00025-00	XS/6,5cm sous menton	1	60	
4042809016093		72819-00026-00	S/7,5cm sous menton	1	60	
4042809016123		72819-00027-00	M/9cm sous menton	1	60	
4042809016154		72819-00028-00	L/10cm sous menton	1	40	
4042809016185		72819-00029-00	XL/11cm sous menton	1	40	
4042809016215		72819-00030-00	XL-Court/7cm ss menton	1	50	

B. Mousse ferme

EAN13	ACL7	Référence (*)	Dimensions	Unité de cde	Carton stand.	Code LPPR
4042809016246		72819-00031-00	XS/6,5cm sous menton	1	60	
4042809016277		72819-00032-00	S/7,5cm sous menton	1	60	
4042809016307		72819-00033-00	M/9 cm sous menton	1	60	
4042809016338		72819-00034-00	L/10cm sous menton	1	40	
4042809016369		72819-00035-00	XL-Court /7cm ss menton	1	50	

(*) les 2 derniers chiffres sont mentionnés à titre indicatif (internes à BSN medical)

STERILISATION:

Produit livré non stérile

BSN medical SAS
57, boulevard Demorieux
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41

CONTACT PHARMACIE :

N° Vert : 0 800 302 282



- Système de Management certifié
- EN ISO 9001
- EN ISO 13485